

游离巯基检测试剂盒(DTNB法)

产品货号: 27017

产品规格: 100-200次/500-1000次

产品简介:

游离巯基检测试剂盒(DTNB法), 即Free Sulphydryl Assay Kit with DTNB或Free Thiol Assay Kit with DTNB, 也称游离巯基含量检测试剂盒、游离巯基定量检测试剂盒, 是一种高效、便捷的用于细胞培养上清液、血清、血浆、细胞及组织裂解液样品中暴露的或表面的游离巯基(Exposed/Surface free sulphydryl groups)检测试剂盒。本试剂盒采用显色法(吸光度法)进行检测。

巯基(Sulphydryl groups or Thiols), 又称氢巯基或硫醇基, 化学式为-SH。巯基是生物系统中反应性非常强并且广泛存在的基团之一, 它存在于大多数蛋白质中, 也存在于一些低分子量物质中, 如谷胱甘肽(GSH)、CoA、脂酸、DTT、巯基乙酸盐和游离半胱氨酸等。蛋白质中的游离巯基通常分为暴露的游离巯基(Exposed/Surface free sulphydryl groups)和在蛋白质高级结构中的游离巯基(Buried free sulphydryl groups), 两者之和为总游离巯基(Total free sulphydryl groups or unbound thiols)。通常蛋白质中的游离巯基指的是暴露的游离巯基, 即活性巯基, 主要存在于半胱氨酸中, 是蛋白质结构和生物体内某些氧化还原反应的重要基团, 在蛋白质中两个巯基脱氢而形成的二硫键(-S-S, Disulfide bonds), 使相邻多肽得以连接。本试剂盒可用于蛋白或非蛋白样品中暴露的或表面的游离巯基的检测。

生物体内的巯基主要为谷胱甘肽巯基和蛋白质巯基, 其中谷胱甘肽巯基主要参与修复氧化损伤的蛋白质和活性氧的清除; 蛋白质巯基则主要通过形成二硫键发挥维持蛋白质构象的作用, 而蛋白质中检测到增多的游离巯基则提示二硫键发生断裂, 蛋白质结构发生变化。目前, 巯基传统的测定方法主要有高效液相色谱法(HPLC)、毛细管电泳法(CE)、液相色谱-质谱联用法(HPLC-GC)等。虽然这些方法在游离巯基检测的灵敏度和准确度上有一定优势, 但是样品处理和实验操作相对复杂、对仪器的要求较高、检测耗时较长、且无法同时检测多个样品。

本试剂盒采用经典的基于DTNB的游离巯基定量检测方法。5,5-二硫代双(2-硝基苯甲酸)(5,5-Dithio-bis-(2-nitrobenzoic acid), DTNB), 又称为6,6'-二硝基-3,3'-二硫代苯甲酸、Ellman试剂(Ellman Reagent)、二硫代硝基苯甲酸或双(3-羧基-4-硝基苯基)二硫, 是一种与巯基相互作用的水溶性试剂, 可用于组织、蛋白质和多肽中游离巯基含量的测定, 基本反应原理如下: 游离巯基(R-SH)与DTNB反应生成黄色可检测的2-硝基-5-硫代苯甲酸盐阴离子(TNB)和混合二硫化物(R-S-TNB), TNB在412nm处有强吸收峰, 通过酶标仪测定此处的吸光度, 并以谷胱甘肽为标准品, 可计算出样品中游离巯基含量。

本试剂盒仅可检测暴露的或表面的游离巯基, 如需检测总游离巯基, 可使用总巯基检测试剂盒(DTNB法); 如需检测蛋白质中二硫键的含量, 可以使用蛋白质半胱氨酸检测试剂盒 (DTNB法), 同时设置未添加Reduction Buffer的样品组, 通过相应的差值就能计算出蛋白质中的二硫键含量; 如需检测谷胱甘肽, 可使用总谷胱甘肽检测试剂盒、GSH和GSSG检测试剂盒。

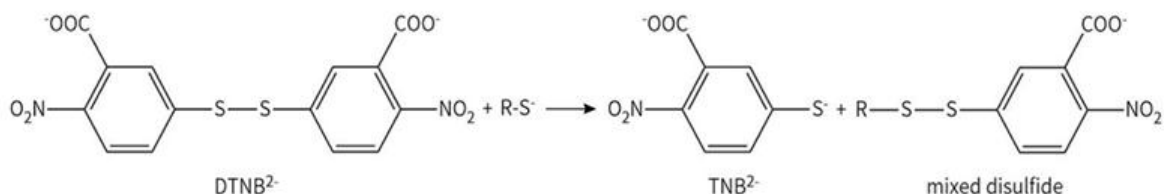


图1. 游离巯基检测试剂盒(DTNB法)工作原理图。

本试剂盒样品处理简单, 检测速度快。对于细胞培养上清液、血清、血浆可直接检测; 对于细胞及组织样品只需匀浆裂解, 取上清进行检测。整个检测过程不足半小时即可完成。

本试剂盒的Assay Buffer经过优化, 可整合可以氧化巯基的二价金属离子, 防止样品被氧化导致样品中巯基含量低于实际值。

本试剂盒提供了检测所需的DTNB和Assay Buffer, 同时还提供GSH作为标准品或阳性对照(Positive control)。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com

本试剂盒检测GSH标准曲线的效果如图2所示。最低检测限约为10 μ M。

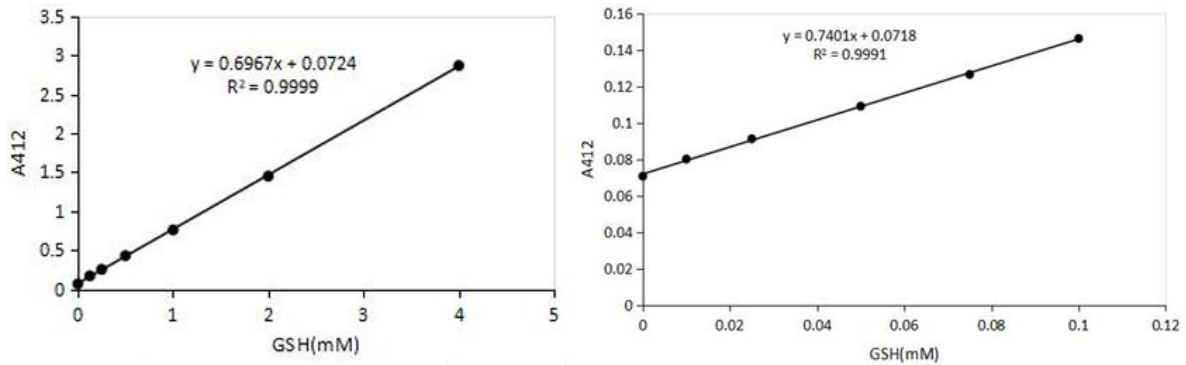


图2.游离巯基检测试剂盒(DTNB法)用于GSH标准曲线的检测效果图。实测数据会因实验条件、检测仪器等的不同而存在差异，图中数据仅供参考。

用于96孔板检测时，本试剂盒小包装的可以进行100-200次检测，中包装可以进行500-1000次检测。本产品仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

试剂名称	100-200次	500-1000次	保存条件
试剂一: Assay Buffer	50ml	250ml	2-8 $^{\circ}$ C
试剂二: GSH	4mg	20mg	-20 $^{\circ}$ C
试剂三: DTNB	2mg	10mg	2-8 $^{\circ}$ C

【注】：粉剂量在mg级别，使用前用手甩几次或者进行离心，打开直接加入要求的试剂即可。

操作步骤(仅供参考):

建议正式实验前，选取2个样本做预测定，了解实验样品情况，熟悉流程，避免样本和试剂浪费!

一、样品的准备:

1. 细胞样品的准备: 对于悬浮细胞，可以离心收集细胞，并用 PBS、HBSS 或生理盐水洗涤一遍。后续可以用 Western 及 IP 细胞裂解液裂解并制备细胞样品。按照每 100 万细胞直接加入 100-200 微升裂解液的比例进行裂解。对于贴壁细胞，也推荐使用 Western 及 IP 细胞裂解液进行裂解，同时可以使用细胞铲或细胞刮辅助收集细胞样品。如果没有使用推荐的裂解液，出现裂解效果不佳的情况，可以把处在裂解液中的细胞样品用玻璃匀浆器在 4 $^{\circ}$ C 或冰浴匀浆。4 $^{\circ}$ C 12000 \times g 离心 10 分钟。取上清用于游离巯基的测定。
2. 细胞培养液上清的准备: 对于贴壁细胞，直接吸取培养液上清用于后续的测定；对于悬浮细胞，离心后吸取培养液上清用于后续的测定。
3. 组织样品的准备: 动物组织可以酌情使用含有 0.16mg/ml 肝素的生理盐水(0.9%NaCl containing 0.16mg/ml heparin)灌流清除组织上残留的血液。每 20mg 组织加入 200 μ l Western 及 IP 细胞裂解液或其它的裂解液，用组织研磨仪或玻璃匀浆器在约 4 $^{\circ}$ C 或冰浴等低温条件下匀浆。4 $^{\circ}$ C 12000 \times g 离心 10 分钟，取上清用于后续的测定。
4. 血液样品的准备: 对于血清样品，将全血在常温下(如 25 $^{\circ}$ C)放置 30 分钟至 2 小时，不要剧烈摇晃以免溶血，待全血自然凝固并析出血清后，4 $^{\circ}$ C 1000-2000 \times g 离心 10 分钟，取黄色上清即得血清，注意不要吸取白色或淡黄色沉淀；对于血浆样品，将全血用肝素或者 EDTA 进行抗凝，4 $^{\circ}$ C 1000-2000 \times g 离心 10 分钟，取黄色或淡黄色上清即得血浆，注意不要吸取白色沉淀。
5. 上述样品可以用 BCA 蛋白浓度测定试剂盒测定蛋白浓度。

二、试剂盒的准备工作:

1. GSH Standard(8mM)的配制: 每 4mg GSH 中加入 1.627ml Assay Buffer，溶解并混匀，即为 8mM 的 GSH Standard。GSH Standard 适当分装后于 -20 $^{\circ}$ C 保存。
2. DTNB 储存液的配制: 每 2mg DTNB 中加入 0.5ml Assay Buffer，溶解并混匀，即为 DTNB 储存液。DTNB 储存液适



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司
 Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com

当分装后于-20℃保存。

- Ellman's Reagent Solution 的配制：每个样品需 180μl Ellman's Reagent Solution，请根据样品数量计算所需 Ellman's Reagent Solution 的总量。将 DTNB 储存液与 Assay Buffer 按照 1:35 的比例混匀，即得 Ellman's Reagent Solution。例如取 50μl DTNB 储存液加入 1.75ml Assay Buffer，混匀即得约 1.8ml Ellman's Reagent Solution。

注：Ellman's Reagent Solution 需根据用量配制，现用现配。

三、样品测定：

- 酶标仪预热 30min 以上，调节波长至 412nm。
- 标准曲线的设置：将 8mM 的 GSH Standard 用 Assay Buffer 倍比稀释为 0、0.125、0.25、0.5、1、2、4mM。GSH 标准曲线请参考图 2。也可自行设置适宜的 GSH 浓度进行标准曲线的设定。
- 每孔加入 180μl Ellman's Reagent Solution，参考下表分别将 20μl 的标准品或者待测样品加入到 96 孔板中。空白对照 (Blank Control) 可以用 Assay Buffer 代替样品，也可以不设置而使用标准曲线中浓度为 0 的吸光度值。室温(约 20-25℃) 孵育 15 分钟。

	Blank	Standard	Sample
Ellman's Reagent Solution	180μl	180μl	180μl
Assay Buffer	20μl	-	-
Standard	-	20μl	-
Sample	-	-	20μl
Total Volume	200μl	200μl	200μl

注1：为获取更加可靠的检测结果，推荐每个样品设置2-3个平行孔。

注2：如果样品中巯基含量过高，超出标准曲线检测范围，可用 Assay Buffer 或裂解液对样品进行适当稀释，稀释倍数记录为 D。如果样品中巯基含量过低，则在样品制备时使用更多的组织或细胞样品。

注3：上述推荐的测定体系为 200μl，如果样品中的巯基浓度不是太低，完全可以把每种试剂的用量减半，这样试剂盒可以测定的总次数可以加倍。

- 用酶标仪测定 412nm 处的吸光度，测得的空白对照吸光度值，记录为 A_{Blank} ，测得的样品或标准品吸光度值，记录为 A_{Sample} 或 $A_{Standard}$ ，用 A_{Sample} 减掉 A_{Blank} ，计算平均吸光度值，记录为 ΔA_{Sample} 。

四、结果计算：

- 计算标准品组中每个点的平均吸光度 $A_{Standard}$ ，用 $A_{Standard}$ 减掉 A_{Blank} ，即为各个标准品的吸光度。以 GSH 标准(mM) 为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制出标准曲线。
- 将 ΔA_{Sample} 代入标准曲线，即可计算出巯基浓度(记录为 B)。
- 根据实验需求选择适当的公式计算游离巯基浓度 C。

按样品质量计算：

$$C(\mu\text{mol}/\text{mg})=B \times D \times V_{\text{Sample}}/W_{\text{Sample}}$$

按样品蛋白浓度计算：

$$C(\mu\text{mol}/\text{mg})=B \times D/C_{\text{Protein}}$$

按巯基浓度直接计算：

$$C(\text{mM})=B \times D$$

V_{Sample} ----细胞或组织裂解后的总体积，ml； W_{Sample} ----样本质量，mg； C_{Protein} ----样品蛋白浓度，mg/ml。

- 计算示例：样品的蛋白浓度 C_{Protein} 经测定为 1mg/ml，未经稀释，室温孵育 15 分钟。如果测出的 $A_{Sample}=0.312$ ， $A_{Blank}=0.064$ ，则 $\Delta A_{Sample}=0.248$ ，根据图 2 标准曲线公式： $y=0.6967x+0.0724$ ，计算出待测样品中的游离巯基浓度 $B=0.245\text{mM}$ ，则待测样品中游离巯基浓度 $C(\mu\text{mol}/\text{mg})=0.245/1=0.245\mu\text{mol}/\text{mg}$ 。

注意事项：

- 本试剂盒检测时涉及氧化还原反应，因此所有氧化剂或还原剂都会干扰本试剂盒的测定。如果在样品中的还原剂(例如 DTT、巯基乙醇等)无法避免，则应尽量控制还原剂的总浓度低于待测样品中的巯基浓度。常用的 TritonX-100、



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com

Tween-20 等去垢剂都含有较高水平的过氧化物，如果必须使用去垢剂，最好使用纯度较高并注明含较低过氧化物的去垢剂。

2. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期:

低温运输。-20℃保存，两年有效；4℃保存，6个月有效。

GSH和DTNB配制成溶液后，需适当分装，-20℃保存至少3个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司
Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com