

血红素检测试剂盒

产品货号：26901

产品规格：96T

产品简介：

血红素是卟啉家族的重要成员之一。血红素最常被认作为血红蛋白（血液中的红色素）的成分，但也存在于许多其他生物学上重要的血液蛋白中，例如肌红蛋白、细胞色素、过氧化氢酶、血红素过氧化物酶和内皮一氧化氮合酶。血红素测定被各种血液疾病的研究人员广泛使用。

血红素微板检测试剂盒基于改进的碱性水溶液方法，其中血红素转化为均匀的有色形式。在505nm处测得的颜色强度与样品中的血红素浓度成正比。优化的配方大大减少了原始样品中物质的干扰，并表现出高灵敏度。

产品内容：

试剂名称	规格	保存温度
反应缓冲液	15mL×1	2-8℃
染料试剂	粉剂×1	2-8℃
标准品	粉剂×1	2-8℃
标准稀释液	5mL×1	2-8℃

注意：

1. 标准品：加入1mL标准稀释液溶解，然后向980μl标准稀释液中加入20μl标准品，浓度为100μmol/L。
2. 染料试剂：使用前加入5mL蒸馏水溶解。

自备材料：

1. 微孔板读数器，用于在505nm处读取吸光度
2. 蒸馏水
3. 移液器，多通道移液器
4. 移液器吸头
5. 96孔低吸附微孔板

样品制备：

对于血液、血清、血浆、尿液和其他生物液体样本，血清和血浆样本可以直接测定。血液样本应在蒸馏水中稀释100倍。

试验方法：

1. 在微孔板中加入以下试剂：

试剂	样品孔	标准孔	空白孔
样品	20μl	--	--
标准品	--	20μl	--
蒸馏水	--	--	20μl
反应缓冲液	130μl	130μl	130μl
染料试剂	50μl	50μl	50μl
混合后，在室温下孵育10分钟，记录在505nm处测得的吸光度。			



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱：zzlybio@126.com

注意事项:

1. 对顶部标准品进行2倍系列稀释以制作标准曲线。
2. 不同样品的浓度范围可能较大。对于未知样品,建议先进行预实验并测试多个剂量,以确保读数在标准曲线范围内。
3. 试剂必须逐步加入,不能混合后一起加入。

计算:

1. 根据样品量:

$$\begin{aligned}\text{血红素 } (\mu\text{mol/L}) &= C_{\text{标准}} \times V_{\text{标准}} \times (\text{OD}_{\text{样品}} - \text{OD}_{\text{空白}}) / (\text{OD}_{\text{标准}} - \text{OD}_{\text{空白}}) / V_{\text{样品}} \\ &= 100 \times (\text{OD}_{\text{样品}} - \text{OD}_{\text{空白}}) / (\text{OD}_{\text{标准}} - \text{OD}_{\text{空白}})\end{aligned}$$


C标准: 标准孔浓度, 100 $\mu\text{mol/L}$;

V标准: 标准孔体积, 0.02ml;

V样品: 样品孔体积, 0.02ml。

数据:

标准曲线仅供参考。每次测定均必须进行标准曲线分析。

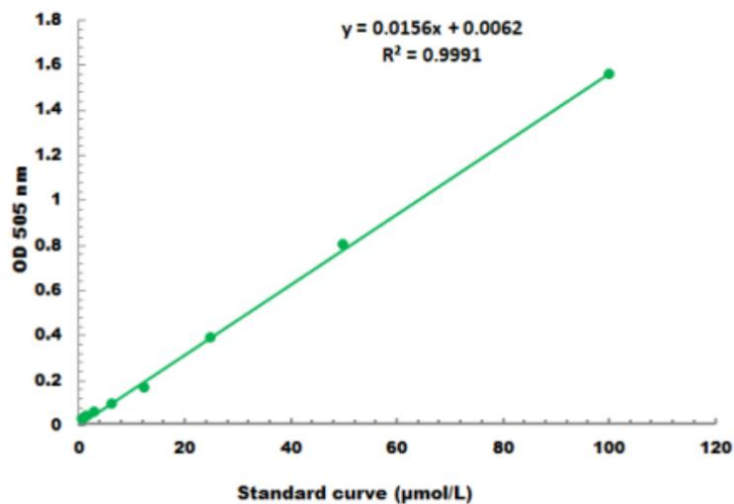

检测范围: 1 $\mu\text{mol/L}$ - 100 $\mu\text{mol/L}$



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com